

ALL MESSAGES INTERNATIONAL



Instrucciones de uso y garantía
Operating instructions and guarantee
Mode d'emploi et garantie
Instruções de utilização e garantia
Manuale d'uso e garanzia
Bedienungsanleitung und Garantie

ALL MASSAGES INTERNATIONAL

NOTICE PRO-FEET

Nous vous remercions d'avoir acheté notre **PRO-FEET**

Pour garantir une qualité maximale, tous nos produits sont soumis à de rigoureux contrôles.

Pour un bonne utilisation du **PRO-FEET** veuillez lire entièrement la notice avant de vous en servir pour la première fois.

INTRODUCTION

Le Rolling Feet Massager utilise la technique du massage traditionnel Shiatsu. Grâce à la plus moderne des technologies vous pourrez bénéficier d'un vrai massage pour détendre les muscles, soulager la fatigue et combattre le stress et la tension. L'appareil dispose également d'une fonction chaleur.

CONSIGNES DE GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Avant de l'utiliser vérifiez si le Massager se trouve dans de parfaites conditions d'utilisation et que le cordon n'est pas endommagé. Si vous constatez un défaut quelconque ou qu'il manque une pièce, adressez-vous à votre distributeur.
2. En cas de problème de santé, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
3. Les enfants ou les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser cet appareil si ce n'est sous la surveillance d'un adulte.
4. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe de l'appareil, auquel cas, il faudra laisser refroidir l'appareil.
5. Si l'usage de l'appareil semble poser problème, cesser immédiatement l'utilisation et consulter votre médecin.
6. Utiliser la fonction de chaleur avec prudence afin d'éviter toute brûlure. Ne pas utiliser l'appareil si vous souffrez de problèmes de peau (peau sensible, mauvaise circulation, ...).
7. Ne pas couvrir l'appareil durant son fonctionnement (par exemple avec une couverture ou un oreiller), cela pourrait provoquer sa surchauffe et causer des dommages.
8. Ne pas utiliser l'appareil durant le sommeil.
9. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les pieds. Ne pas l'utiliser sur d'autres parties du corps.
10. Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 30 minutes.
11. Ne pas utiliser l'appareil juste avant ou après avoir mangé. Patienter au moins 1 heure.
12. Ne pas utiliser le Massager dans des endroits humides et éviter qu'il se mouille. En cours de fonctionnement de l'appareil ne



- pas le toucher avec les mains mouillées.
13. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante est supérieure à 40°C.
 14. Utiliser l'appareil dans des conditions de température ambiante normales. Si l'appareil est exposé, même pour une courte durée, à de basses températures, laisser s'écouler un intervalle d'au moins une heure avant d'allumer l'appareil. L'allumage immédiat pourrait générer de la vapeur à l'intérieur de l'appareil et en affecter le fonctionnement.
 15. Ne pas appuyer et ne pas forcer aucune partie du corps sur le mécanisme de massage en fonctionnement.
 16. Ne pas insérer d'objets dans l'appareil.
 17. Ne pas se mettre debout sur l'appareil.
 18. Ne pas prendre l'appareil par le cordon, ne pas l'écraser.
 19. Ne pas déplacer l'appareil en tirant du cordon de branchement.
 20. Pour qu'il ne s'endommage pas, ne pas enrouler le cordon de branchement autour de l'appareil.
 21. Après utilisation, éteindre complètement l'appareil et débranchez-le.
 22. Ne pas débrancher l'appareil sans l'avoir d'abord éteint.
 23. En cas de coupure du courant électrique, débranchez la fiche de la prise électrique.
 24. Débranchez l'appareil en retirant la fiche de la prise, ne pas tirer du cordon.


25. Pour éviter tout risque d'incendie, dommages ou chocs électriques, utilisez la tension requise.
26. Ne pas exposer le Massager à des températures élevées. L'appareil est à garder en lieu sec.
27. Si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas de le réparer, de le démonter ni de le modifier vous-même. Des réparations non autorisées risquent d'entraîner des dommages et d'annuler la garantie. Adressez-vous au Service Technique pertinent.

Un médecin doit être consulté pour l'utilisation de l'appareil dans les cas suivants :

1. L'utilisateur est sous traitement
2. Hypertension, maladie cardiaque, artériosclérose cérébrale, thrombose cérébrale
3. Tumeurs malignes
4. Grossesse
5. Ostéoporose
6. Utilisation d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre dispositif interne
7. Maladies graves



DESCRIPTION

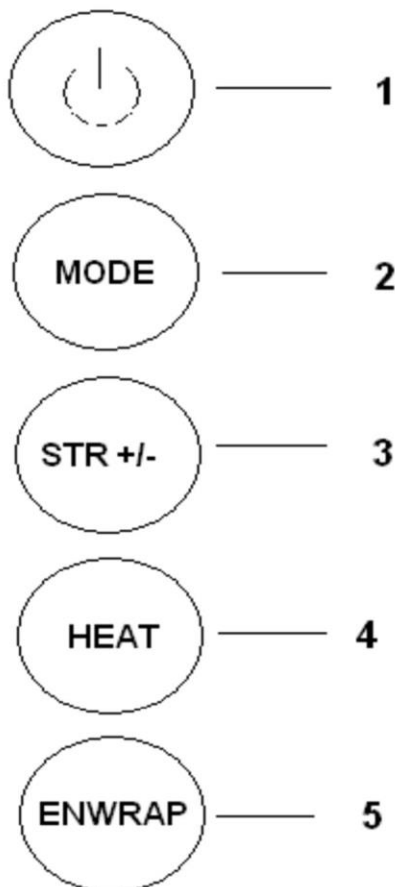

- 1 - Bouton marche/arrêt
- 2 - Sélection du mode - 2 modes disponibles voyant rouge ou bleu
- 3 - Réglage de la force de massage - 3 niveaux - Voyant rouge : niveau élevé - Voyant bleu : niveau faible
- 4 - Sélection du Mode chaleur - Allumage du voyant rouge si le mode est activé (activé par défaut)
- 5 - Mode de massage par air

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Placez le Massager sur une surface plane.
2. Branchez l'appareil au courant.

3. Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton de marche (1). Par défaut, l'appareil fonctionne en mode chaleur (voyant rouge), un niveau de résistance élevé (voyant rouge), mode 1 (voyant bleu).
4. Pour désactiver la fonction chaleur, appuyer sur le bouton HEAT (4), le voyant rouge s'éteindra.
5. Pour modifier le niveau de force, appuyer sur le bouton STR (3).
Voyant bleu : niveau faible -
Voyant rouge : niveau élevé
6. Pour changer le mode, appuyer sur le bouton MODE (2).
Voyant bleu : Mode 1 - Voyant rouge : Mode 2.
7. Pour un massage uniquement par pression d'air, appuyer sur la touche ENWRAP (5).
8. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt (1).

INSTRUCTIONS ET NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
2. Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Éviter que l'appareil n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas plonger l'appareil dans un liquide pour le nettoyer. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de produits de nettoyage pour le verre ou les meubles ou encore du dissolvant pour nettoyer l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PROFEET
VOLTAGE	24VCC/2A
PUISSANCE	45

Garantie

distributeur:

ALL MESSAGES INTERNATIONAL

FR

19 rue Louis Ulbach 92 400

COURBEVOIE

<http://www.all-messages>

allmessages@gmail.com

Veillez conserver la facture à titre de justificatif d'achat.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au n° de
téléphone du Service Clientèle: +33 6 35 33 77 74

